



■ Rivadavia N° 423 | Tel.: 0387 4 22 7262 (Líneas rotativas) | Fax: interno 231 | 4400 Salta
E-mail: atencionclientes@magnus.com.ar
www.magnus.com.ar

Somos una empresa dedicada, entre otras cosas, a la atención de heridas.

Contamos con un equipo asistencial especializado de médicos, enfermeros y psicólogos respaldados por un equipo administrativo comprometido en la atención de pacientes.

Brindamos tratamientos para heridas centrados en las necesidades de cada paciente. Combinamos conocimiento y experiencia con la mejor tecnología disponible para el tratamiento de heridas.

Con nuestro lema *El enfoque hace la diferencia* prestamos tratamientos para heridas con alta eficiencia y seguridad.

Nuestro equipo de atención especializado, nos permite prestar tratamientos de heridas de altísima calidad.

Prestamos tratamientos y servicios de forma segura y efectiva.

Nuestros esfuerzos están orientados a favorecer la cicatrización de heridas mejorando significativamente la calidad de vida y confort del paciente.

Partimos del diagnóstico de la herida y de las necesidades de cada paciente. Para ofrecer alternativas adecuadas a sus capacidades.

Evaluamos permanentemente los resultados y ponemos a disposición informes evolutivos periódicos donde se analizan nuevas opciones para optimizar los tiempos y costos de tratamiento.

Nos enorgullecemos y nos alegra saber que nuestros pacientes están en buenas manos cuando usan productos Carilex.



Un producto NPWT realmente considerado es todo lo que necesita. NPWT VT • 100, VT • 200 , VT • ONE por la poderosa curación que mereces.

Aquí en **SANA**, nuestro lema es “*el enfoque hace la diferencia*”. La atención a nuestros pacientes siempre ha sido el impulso principal para que nos esforcemos por la excelencia. Cuidar a los pacientes puede ser estresante, es por eso que un producto intuitivamente inteligente puede marcar una gran diferencia. Durante demasiado tiempo, NPWT se ha entendido como una complicación difícil, se deben realizar numerosos cálculos antes de que un cuidador pueda decidir el producto adecuado para el paciente. **SANA** ha decidido proporcionar una solución más inteligente para la terapia de heridas. Presentamos NPWT VT • 100, VT • 200 , VT • ONE, las unidades de terapia de heridas con presión negativa verdaderamente inteligente y fácil de usar para todo tamaño de heridas.

Menos es mucho, mucho más.

NPWT es una solución probada para proporcionar una terapia de heridas excepcional para los pacientes. Como parte de un tratamiento integral de heridas por presión negativa, los equipos NPWT VT • 100, VT • 200 , VT • ONE son fáciles de usar, silenciosos e increíblemente potentes. Es compatible con múltiples tamaños de heridas.

Nuestros dispositivos VT ofrecen modos continuos, intermitentes, instilación, ajustes de presión ajustables individualmente y una alta tasa de eliminación de líquidos. El diseño liviano portátil con recipiente desechable y bolsa de transporte significa que es extremadamente limpio y conveniente para el uso diario.

El poder de curar.

VT • 100, VT • 200 , VT • ONE están diseñados con un poder de succión extraordinario específicamente para heridas más grandes.

En combinación con el apósito XL VT, VT • 200 crea el ambiente perfecto para que cicatrices de heridas como las heridas abdominales. Con equipos de expertos en investigación y diseño en tres continentes que trabajan incansablemente a lo largo de los años, VT • 100, VT • 200 , VT • ONE demuestran ser productos extraordinarios que solo puede ser producido por personas que se preocupan, y Carilex se preocupa profundamente por lo que construimos.

Nos preocupamos por hacer su vida más fácil, nos preocupamos por hacer una diferencia y, lo más importante, nos preocupamos por brindarle la atención que se merece.

Indicación de uso

VT • 100, VT • 200 , VT • ONE están indicados para su uso con pacientes con las siguientes heridas:

- Traumático
- Heridas Dehiscidas
- Heridas crónicas (úlceras por presión, úlceras del pie diabético, úlceras venosas de la pierna)
- Heridas agudas
- Aletas e injertos

Contraindicaciones

VT • 100, VT • 200 , VT • ONE están contraindicados en pacientes con las siguientes condiciones:

- Presencia de tejido necrótico.
- Malignidad (excepto por razones de calidad de vida para pacientes terminales)
- Desnutrición no tratada
- Arterias, venas, nervios u órganos expuestos
- Uso sobre sitios anastomóticos

Precauciones

Se deben tomar precauciones para pacientes con las siguientes condiciones:

- Pacientes que toman medicamentos anticoagulantes o que tienen sangrado activo o que tienen hemostasia de heridas difíciles
- Muy cerca de los vasos sanguíneos, órganos, músculos y fascia que requieren protección adecuada
- Vasos y tejidos irradiados
- Fragmentos óseos

**** Para una indicación completa de uso, consulte el manual del usuario de VT • 200. No opere este producto antes de leer completamente el manual.***



Terapia continua

La presión negativa se administra constantemente al lecho de la herida con una configuración de presión personalizable para adaptarse a la prescripción de cada paciente.

Terapia intermitente

Transición intermitente de la configuración de presión administrada al lecho de la herida con un tiempo de ciclo personalizable para adaptarse a la prescripción de cada paciente, aumentando así la estimulación de la herida.

Batería de reserva

El sensor automático de detección de energía activa la batería de respaldo en caso de falla de energía principal y permite que el tratamiento continúe sin interrupciones.



Mostrar uso día / hora

Visualización del tiempo de uso total acumulado del dispositivo.

Unidad de potencia ligera

Diseño ligero para una fácil portabilidad.

Hasta 24 horas de funcionamiento con batería.

Larga duración de la batería de hasta 24 horas, para una terapia ininterrumpida y portabilidad.

Alta portabilidad

Incluye una práctica bolsa de transporte para sujetar cómodamente sobre el hombro. Diseño de suspensión para una fácil fijación al somier y / o al poste IV.



VT • 200 Instilación

La aplicación de presión negativa ayuda a mantener un ambiente húmedo para el lecho de la herida, al tiempo que elimina el exceso de líquidos y exudados, materiales infecciosos, desechos de tejidos y reduce el edema de los tejidos, por lo que puede promover la cicatrización de heridas. Puede ser beneficioso para pacientes con heridas traumáticas y dehiscencias, quemaduras de espesor parcial, heridas crónicas como úlceras por presión, úlceras del pie diabético y úlceras venosas de las piernas, heridas agudas y colgajos e injertos. Con modos de operación continua e intermitente, ajustes de presión ajustables individualmente y recipiente de recolección desechable en varios tamaños, VT • 200 brinda una terapia integral para heridas que se adapta a cada etapa de necesidades.


KIT DE CURACION

El kit de curación VT está indicado para pacientes que se benefician de la terapia de manejo de heridas a través de la aplicación de terapia de heridas de presión negativa para la eliminación de líquidos y exudados en exceso, material infeccioso y restos de tejido que pueden promover la cicatrización de heridas. Viene en 3 tamaños diferentes, el kit de vendaje VT ofrece un rendimiento superior al mantener la presión negativa prescrita en el área de tratamiento.

El kit de vendaje VT está diseñado cuidadosamente para promover los resultados de curación más efectivos mientras se prueba rigurosamente para la comodidad y seguridad óptimas que nuestros pacientes necesitaban.

1. **400-600 micras poro siza:** Proporciona un flujo de exudado eficiente y entrega de manera uniforme la presión negativa al lecho de la herida.
2. **Fácil de manejar drapeado:** Diseño drapeado sin complicaciones que permite una aplicación sin esfuerzo.
3. **Alta tasa de MVT en el drapeado:** Su tasa de transmisión de vapor de humedad complementa la espuma y otros componentes del apósito para lograr un efecto eficiente.

4. **Almohadilla de domo suave:** Permitir al paciente usar de manera segura y cómoda.
5. **Tubo transparente y conector** Permitir una inspección rápida y clara de bloqueo.
6. **Conectores bloqueables:** Prevención de fugas de los tubos.
7. **3 tamaños diferentes:** Apto para todos los tamaños y tipos de heridas.

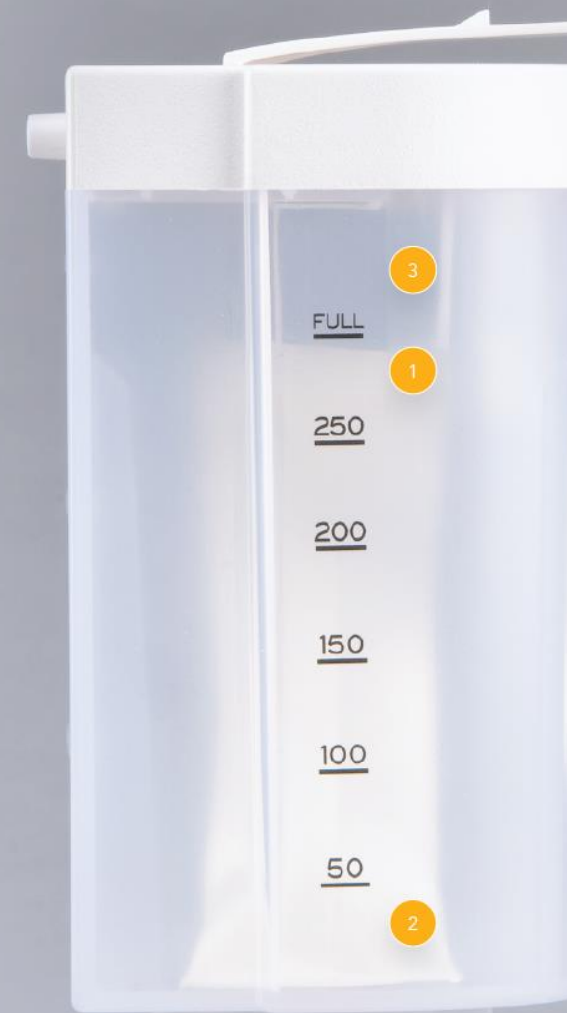

Integrated Canister Release Latch



RECOLECTOR DE FLUIDOS

1. **3 tamaños diferentes (hasta 1000 ml)**
Adecuado para el paciente en todas las etapas de la atención, mayor capacidad de fluidos para la rentabilidad.
2. **Bolsita de gel del recipiente del depósito**
Garantizar la recogida y eliminación de l íquidos de forma segura e higiénica.

3. **Sistema de filtro de 3 capas**
Barrera sofisticada diseñada para evitar la contaminación cruzada y el olor.
4. **Pestillo de liberación integrado**
Para una fácil operación con una sola mano.